

POLAR EQUINE -BÄLTE

Kom igång guide

POLAR[®]
LISTENS TO YOUR BODY


1. SETETS INNEHÅLL

1. **Bälte:** Elektrodytorna i plast (A, B) på bältets baksida detekterar pulsen. Fickan (C) skyddar pulssensorn mot stötar och repor och förhindrar att den åker ur bältet.
2. **Pulssensor:** Pulssensorn skickar pulssignalen till träningsdatorn.



Användarhandboken på tyska, franska, italienska, spanska, finska och svenska kan laddas ner från www.polar.com/support.

För videohandledning, gå till http://www.polar.com/en/polar_community/videos.

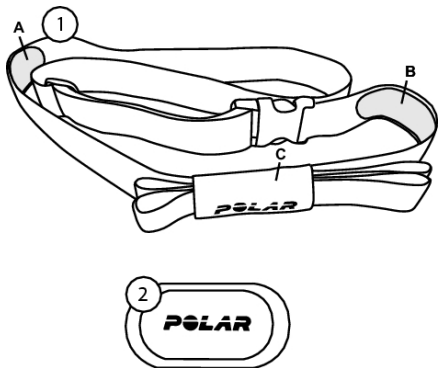

2. PLACERA BÄLTET

1. För att pulssensorn ska kunna mäta pulsen korrekt ska du kontrollera att elektrodytorna i plast ligger dikt an mot hästens hud. Fukta bältet, till exempel i en hink med vatten (1).
2. Fukta även hästens hår vid de ytor där elektroderna på bältet placeras (2). Om din häst har långt eller tjockt hår kan du klippa de här områdena. Det förbättrar betydligt pulssignalens kvalitet.
3. Fäst pulssensorn på fickan (3). Stäng fickan ordentligt.




4. Placera bältet såsom visas (4), med pulssensorfickan på hästens vänstra sida. Detta säkerställer att elektrodytorna på bältet är i rätt position.

För att optimera kontakten mellan hästens hud och elektroderna, kan kontaktgel användas på elektroderna. Det säkerställer en bättre detektion av hästens puls. Stryk på gelen på elektrodytorna på bältets baksida.

Pulssensorns räckvidd är över 10 m. Du kan därför övervaka hästens puls även vid longering.



För videohandledning, gå till http://www.polar.com/en/polar_community/videos. För anvisningar om visning av hästars puls och registrering av ett träningspass, se träningsdatorns användarhandbok. Användarhandboken kan laddas ner från www.polar.com/support.

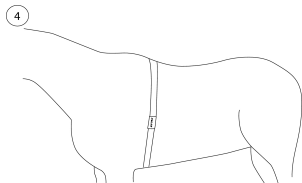

3. VIKTIG INFORMATION

Skötsel och underhåll

Följ skötselanvisningarna för att säkerställa tillförlitlig mätning och för att maximera bältets och pulssensorns livslängd. Följande anvisningar hjälper dig att uppfylla garantivillkoren.

Pulssensor: Ta loss pulssensorn från bältet efter varje användning och torka den med en mjuk handduk. Rengör pulssensorn med en mild tvål och vatten vid behov. Använd aldrig alkohol eller slipande material (t.ex. stålull eller rengöringskemikalier).

Bälte: Skölj bältet under rinnande vatten efter varje användning och häng upp det för att torka. Rengör bältet varsamt med en mild tvål och vatten vid behov. Använd inte fuktgivande tvålar, eftersom de kan lämna kvar rester på bältet. Bältet får inte blötläggas, strykas, kemtvättas eller blekas. Sträck inte bältet och böj inte elektrodytorna kraftigt.

Torka och förvara bältet och pulssensorn separat för att maximera livslängden på pulssensorns batteri. Förvara pulssensorn på en sval och torr plats. För att förhindra oxidering av spännet ska pulssensorn inte förvaras fuktig i ett tättslutande material som inte andas, som t.ex. en sportväska. Utsätt inte pulssensorn för direkt solljus under längre perioder.

Service

Under den 12 månader långa garantitiden rekommenderar vi att endast ett auktoriserat Polar Service Center utför service. Garantin täcker inte skador eller följdskador som härrör från service som inte auktoriserats av Polar Electro. Besök www.polar.fi/support och landsspecifika webbplatser för kontaktinformation och alla adresser till Polar Service Center.

Garanti

Begränsad internationell Polar-garanti för Equine-produkter

- Polar Equine-produkter utvecklas och tillverkas för användning i hästsporter. Alla produkter genomgår noggranna tester innan de lämnar fabriken.
- Denna garanti påverkar inte kundens lagstadgade rättigheter under tillämpliga gällande nationella lagar eller delstatslagar, eller kundens rättigheter gentemot återförsäljaren, med avseende på försäljningsavtalet.
- Denna begränsade Polar internationella garanti utfärdas av Polar Electro Inc. till kunder som har köpt sin produkt i USA eller Kanada. Denna begränsade Polar internationella garanti utfärdas av Polar Electro Oy till kunder som har köpt sin produkt i andra länder.
- Polar Electro Oy/Polar Electro Inc. garanterar den ursprungliga innehavaren av denna produkt att produkten är fri från defekter när det gäller material eller utförande i tolv (12) månader från inköpsdatumet.
- Det ursprungliga inköpskvittot är ditt inköpsbevis!
- Garantin täcker inte batteriet, normalt slitage, skador p.g.a. felaktig användning, missbruk, olyckor eller icke efterlevnad av försiktighetsåtgärderna, felaktigt underhåll, spruckna, brutna eller repade fodral/displayer, modifierade eller ändrade produkter eller deras delar samt elektrodbältet och sensorbältet.
- Garantin täcker inte några skador, förluster, kostnader eller utgifter, direkta eller indirekta, efterföljande eller specifika, uppkomna av, eller relaterade till produkten.
- Artiklar som har köpts i andra hand omfattas inte av garantin, såvida inget annat anges i den lokala lagen.
- Under garantiperioden repareras eller ersätts produkten på något auktoriserat Polar Service Center, oavsett i vilket land produkten köptes.

Garantin med avseende på alla produkter begränsas till de länder där produkten ursprungligen marknadsfördes.

Legal information finns på www.polar.com/support.



Den överkorsade papperskorgen visar att Polars produkter är elektroniska enheter och omfattas av Europaparlamentets och Europarådets direktiv 2002/96/EG om avfall från elektriska och elektroniska apparater (WEEE). Batterier och ackumulatörer som används i produkter omfattas av Europaparlamentets och Europarådets direktiv 2006/66/EG från den 6 september 2006 om batterier och ackumulatörer och förbrukade batterier och ackumulatörer. Dessa produkter och batterier/ackumulatörer som finns i Polars produkter ska därför kasseras separat i EU-länderna. Dessa produkter och batterier/ackumulatörer som finns i Polars produkter ska därför kasseras separat i EU-länder.



Denna märkning visar att produkten är skyddad mot elstötar.

Copyright © 2012 Polar Electro Oy, FI-90440 KEMPELE.

Polar Electro Oy är ett ISO 9001:2008 certifierat företag.

Med ensamrätt. Ingen del av denna användarhandbok får användas eller reproduceras i någon form eller på något sätt utan föregående skriftligt tillstånd Polar Electro Oy. Namn och logotyper märkta med en ®-symbol i denna användarhandbok eller i förpackningen till denna produkt är varumärken som tillhör Polar Electro Oy.

Ansvarsfriskrivning

Observera att dessa garantivillkor gäller för Polar Equine-produkter istället för övriga garantivillkor från Polar Electro, även om andra villkor anges i någon produktdokumentation.

Manufactured by

Polar Electro Oy

Professorintie 5

FIN-90440 KEMPELE

Tel +358 8 5202 100

Fax +358 8 5202 300

www.polar.fi

POLAR[®]
LISTENS TO YOUR BODY